

Informations réglementaires

| | | |
|----------|----------------------|-----------------------------------|
| Marquage | Indice de classement | PHTALATES LATEX |
| CE | I | |

De conception entièrement plastique, ce stéthoscope est à usage patient, pour prévention des maladies nosocomiales.

Le dispositif possède un micro plat, simple position en aluminium avec une membrane de micro en terphane, insensible aux écarts de température.

La lyre est en polyamide.

1 - Identification du dispositif



Visuel adulte



Visuel enfant

2 - Références

| Référence | Désignation |
|-----------|--|
| S20031 | Stéthoscope complet micro Ø 34 mm enfant |
| S20029 | Stéthoscope complet micro Ø 45 mm adulte |

3 - Utilisation du dispositif

- Auscultation cardiaque
- Auscultation vasculaire
- Auscultation pulmonaire
- Prise de tension artérielle

Dessillons & Dutrillaux

Zone Industrielle La Tuque

47240 CASTELCULIER

Tél : +33 5 53 48 30 66


Fax : +33 5 53 47 24 64

technique@ddmedical.fr
www.ddmedical.fr


Certifié ISO 13485

4 - Identification et caractéristiques des différents sous ensembles

| Identifiant | Désignation | Caractéristique |
|-------------|------------------------------------|------------------------|
| A | Micro plat simple position Ø 43 mm | Aluminium |
| B | Bague de micro (vissée) | ABS |
| C | Embout de lyre | PVC moulé ultra souple |
| D | Ressort de lyre | Polyamide |
| E | Lyre | Polyamide |
| F | Tubulure | PVC |
| G | Membrane de micro | Terphane |

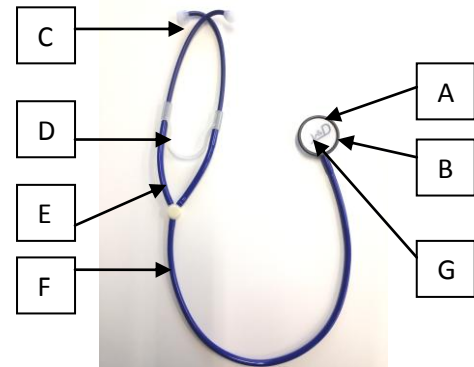

5 - Nettoyage désinfection

Ce stéthoscope n'est pas destiné à être réutilisé, il n'est donc pas prévu de protocole de nettoyage et de désinfection.

6 - Conditionnement

| Référence | Nombre unité par CDT |
|-----------|----------------------|
| S20031 | 1 |
| S20029 | 1 |
| S20030 | 5 |

7 - Stockage

| Type d'emballage | Local | Température | Humidité | Pression atmosphérique |
|------------------|---------|---------------|-----------|------------------------|
| Origine | Ventilé | -10° à 80 ° c | 30 à 40 % | 500 à 1060 hpA |

8 – Garantie

La garantie donne l'assurance au Client qui achète un produit D & D que si le produit ne fonctionnait pas tel qu'indiqué dans les notices d'utilisation, il serait remplacé ou réparé.

Le produit doit être utilisé conformément à l'étiquetage, il ne doit pas avoir été modifié ni avoir fait l'objet d'un accident ou d'une utilisation erronée, abusive ou inappropriée.